

Kopfstücke für Piezoaktoren

Zubehör



P-176.50-60-Bxx

- Flexible Kopfstücke zum Ausgleich von Biegekräften
- Kugelkopfstück zum Schutz der Piezokeramik vor Scherkräften
- Auf- bzw. einschraubbar

Flexible Kopfstücke P-176.50 und P-176.60


Piezokeramik ist empfindlich gegen Biegekräfte. Die flexiblen Kopfstücke P-176.50 und P-176.60 werden für Anwendungen empfohlen, bei denen diese Biegekräfte unvermeidbar sind. Sie können auf die Kopfstücke der Piezoaktoren P-842 / P-843 bzw. P-844 / P-845 aufgeschraubt werden.

Kugelkopfstück P-176.B12

Um Biegemomente und Scherkräfte von der Piezokeramik fernzuhalten, empfehlen wir den Einsatz von Kugelkopfstücken. Sie können in das Kopfstück des Piezoaktors eingeschraubt werden.


Hinweis: Durch den Punktkontakt des Kugelkopfstücks wird die Steifigkeit des Gesamtsystems reduziert.

Zeichnungen / Bilder

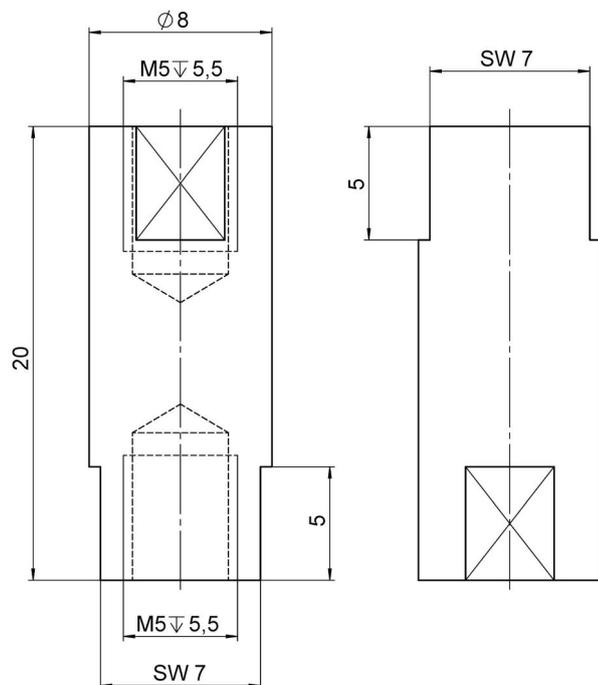


P-176.50, Abmessungen in mm

Zeichnungen / Bilder

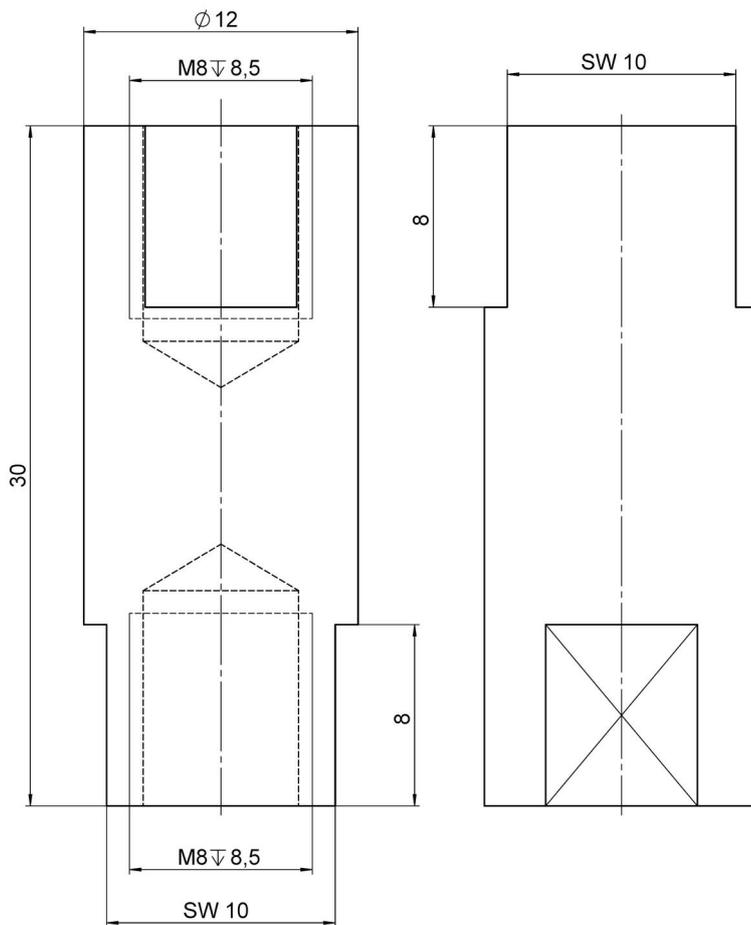

P-176.60, Abmessungen in mm

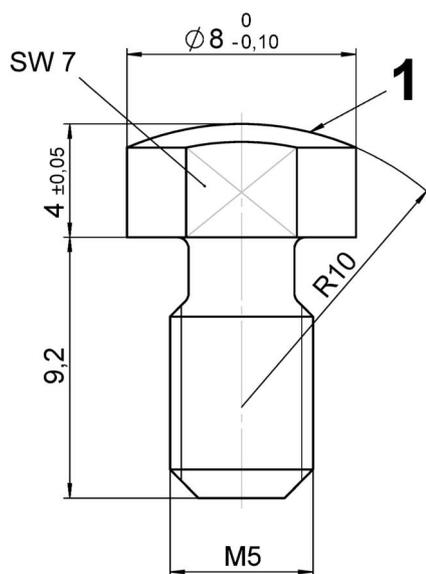

P-176.B12, Abmessungen in mm. 1 = Kontaktfläche gehärtet und poliert.

Bestellinformationen

P-176.50

Flexibles Kopfstück mit M5 Gewinde, zur Montage auf P-84x Piezoaktoren

P-176.60

Flexibles Kopfstück mit M8 Gewinde, zur Montage auf P-84x Piezoaktoren

P-176.B12

Kugelkopfstück, Kontaktfläche gehärtet und poliert